

moveIT@ ISS+ Verschieben der Anwendung

Mit der Funktion „Reparieren“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre lokale oder Ihre Netzwerkversion möglichst einfach von einem Verzeichnis auf ein anderes zu verschieben oder auf einen neuen Rechner zu übertragen.

Gerne bietet Ihnen moveIT Software die Durchführung einer Datenbankübernahme zu einem günstigen Pauschalpreis an. Die rasche und professionelle Durchführung erfolgt durch einen Techniker der moveIT Software und wird per Fernwartungs-Tool durchgeführt. Sollten Sie die Installation und Datenbankübernahme selbstständig bzw. durch einen eigenen Administrator vornehmen, bitten wir Sie diese Anleitung sorgfältig zu lesen und Schritt für Schritt zu realisieren. In diesem Fall erfolgt die Durchführung auf eigenes Risiko. Sollte wider Erwarten noch zusätzlicher technischer Support erforderlich sein, so weisen wir Sie darauf hin, dass entsprechende Unterstützung seitens eines Technikers der moveIT Software in Rechnung gestellt wird. Gerne beraten wir Sie auf Anfrage über die zu erwartenden Kosten.



ACHTUNG:

Falls Sie eine lokale Installation in eine Netzwerkinstallation oder eine Netzwerkinstallation in eine lokale Installation übernehmen wollen, dann wenden Sie sich bitte hierzu an unsere Hotline!



ACHTUNG:

Bevor Sie mit dem Verschieben beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass das Programm geschlossen bzw. die Datenbank per moveITDBControl vorher beendet ist (bei einer Netzwerkversion)!

Wichtige Vorarbeiten:

- Ist ein Antivirenprogramm aktiv (Terminalserver, Datenbankserver und Netzwerk-Clients), stellt man sicher, dass die Prozesse: „prowin32.exe“, „_mprshut.exe“ und „_mprosrv.exe“ * bei der Echtzeitprüfung NICHT geprüft werden (über Ausnahmen etc.). Ist dies nicht möglich, können alternativ folgende Dateieendungen: *.db, *.d1, *.b1, *.lg, *.pl, *.r, *.wrx, *.log, *.bas, *.bmp, *.tif und *.png ausgenommen werden.
- Prüfen Sie, ob Sie über Administratorrechte (Server und Client) verfügen.

Erste Schritte

Verschieben Sie zuerst den kompletten Ordner der Installation in den neuen Pfad beziehungsweise kopieren Sie den gesamten Ordner moveIT_ISS auf einem neuen Rechner.

Hier sollte man nun die Berechtigungen prüfen bzw. richtigstellen.

- Anwender benötigen zum Ausführen der Applikation folgende Windows Sicherheitsberechtigungen auf das gesamte moveIT@ISS+ Verzeichnis:
 - Ändern
 - Lesen/Ausführen
 - Schreiben
 - Löschen



ACHTUNG:


Falls es sich hier um eine Netzwerkinstallation handelt, dann verbinden Sie jetzt das Netzlaufwerk!

Reparieren


Um die geänderten Pfade anzupassen führen Sie bitte mit der zuletzt installierten Programmversion eine Reparatur durch! Die Installationsdateien finden im Ordner **moveIT_ISS/Data/Updates**.

Durch Doppelklick auf die **RL/SP/HF_XXXXXX.exe** starten Sie die Installation.

Wählen Sie im folgenden Fenster die gewünschte **Installationssprache** aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **[OK]**.

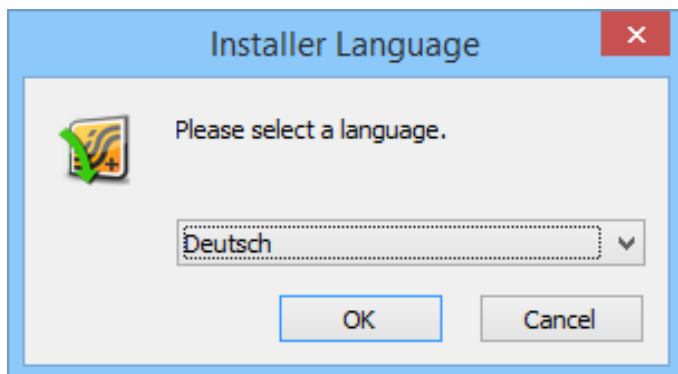


Im nun folgenden Fenster „**Willkommen**“ erhalten Sie Informationen zur Installation.

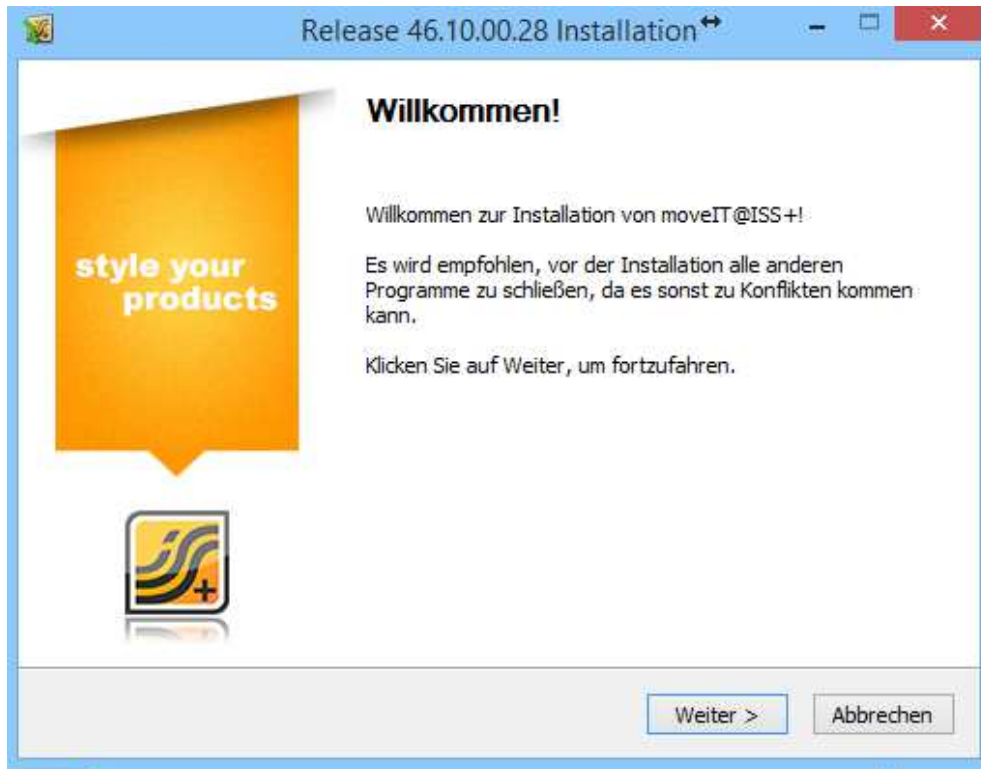


Klicken Sie auf den Button **[Weiter]**, um die Installation fortzusetzen.

Im Fenster „Installationsart“ wählen Sie bitte den Punkt „Reparieren“ aus.

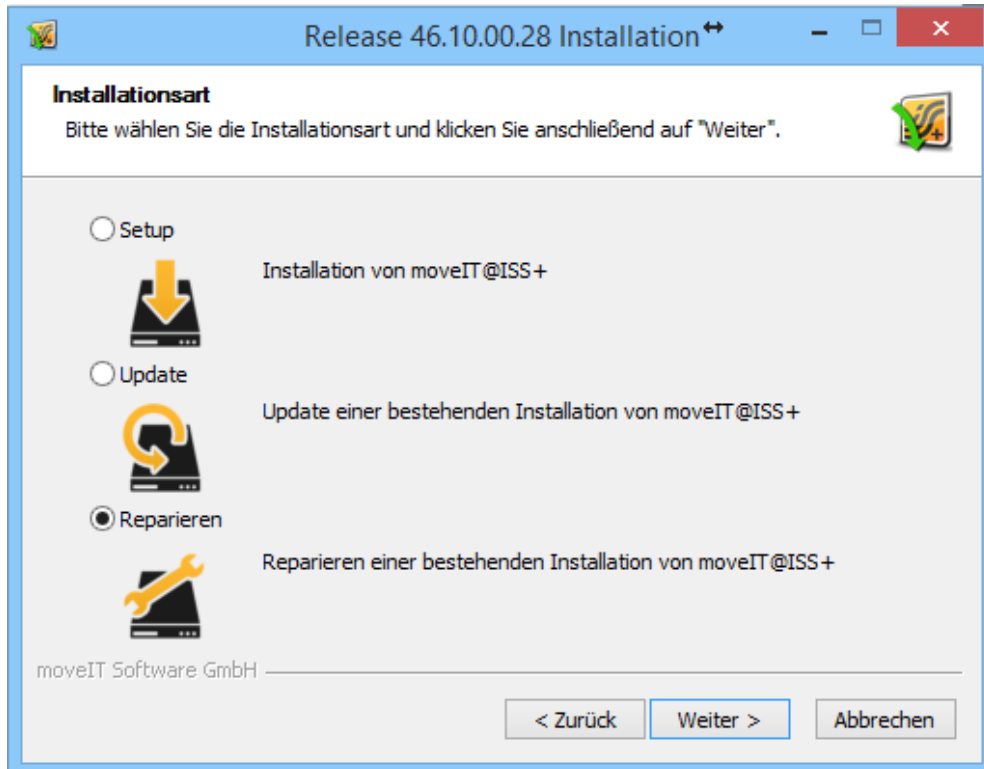

Klicken Sie auf den Button **[Weiter]**, um die Installation fortzusetzen.


Im Fenster „**Reparieren**“ wählen Sie bitte den Pfad zu Ihrer ISS.exe am lokalen Laufwerk aus.

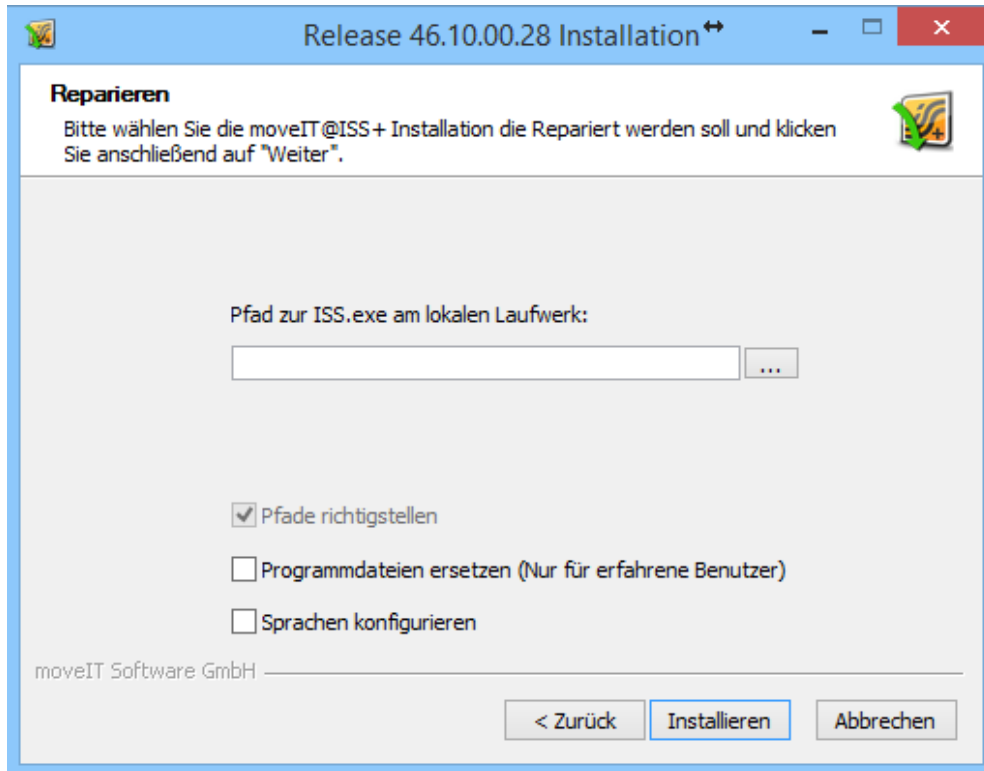




ACHTUNG:

Bei der Netzwerkversion müssen Sie zusätzlich den Pfad zur ISS.exe am Netzlaufwerk auswählen.

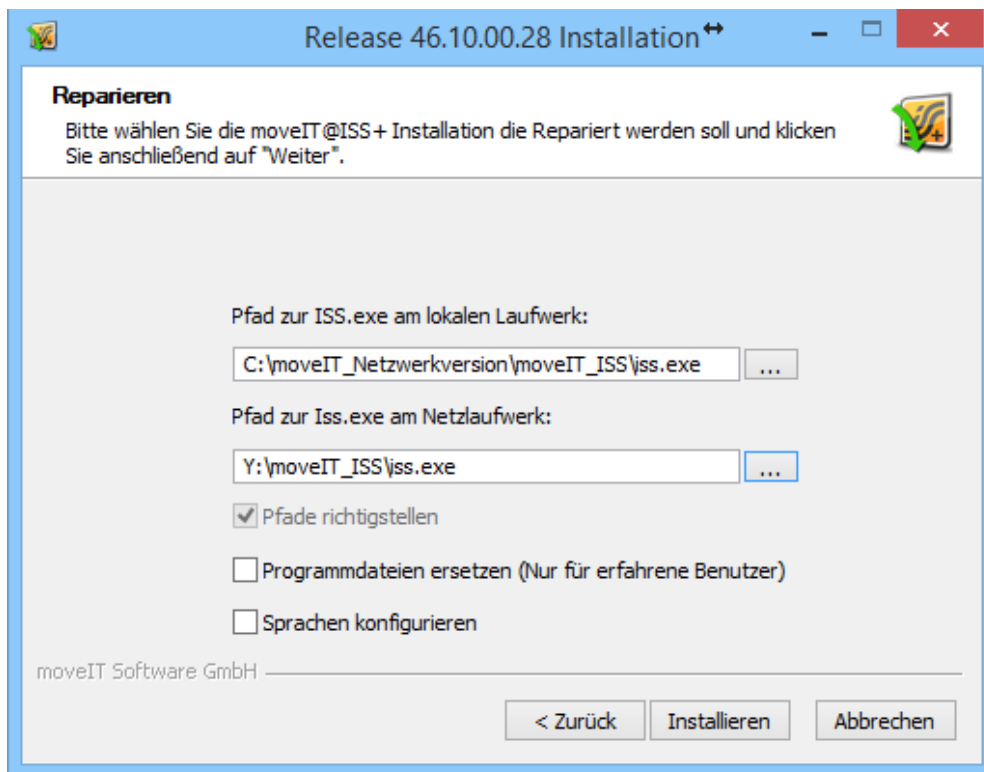


Klicken Sie nun auf **[Installieren]**, um den Vorgang zu starten.

Im Fenster „**Installiere...**“ können Sie den Fortschritt der Installation beobachten.

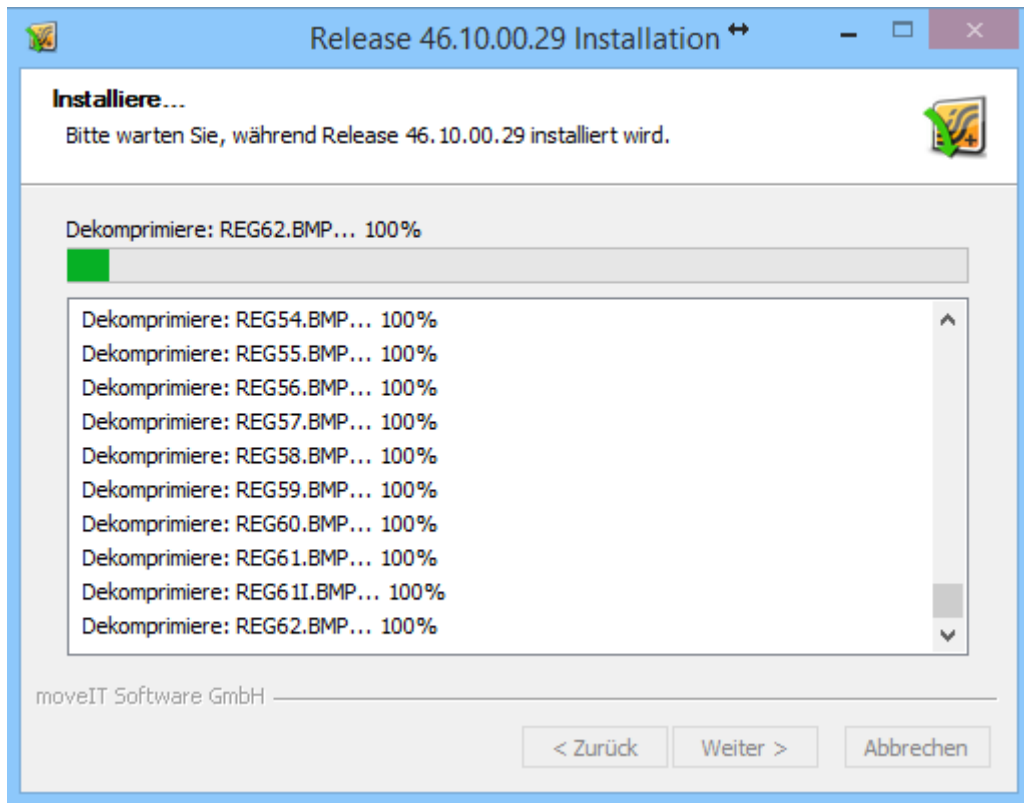

Im folgenden Fenster werden Sie darüber informiert, dass die Anpassungen erfolgreich durchgeführt wurden:

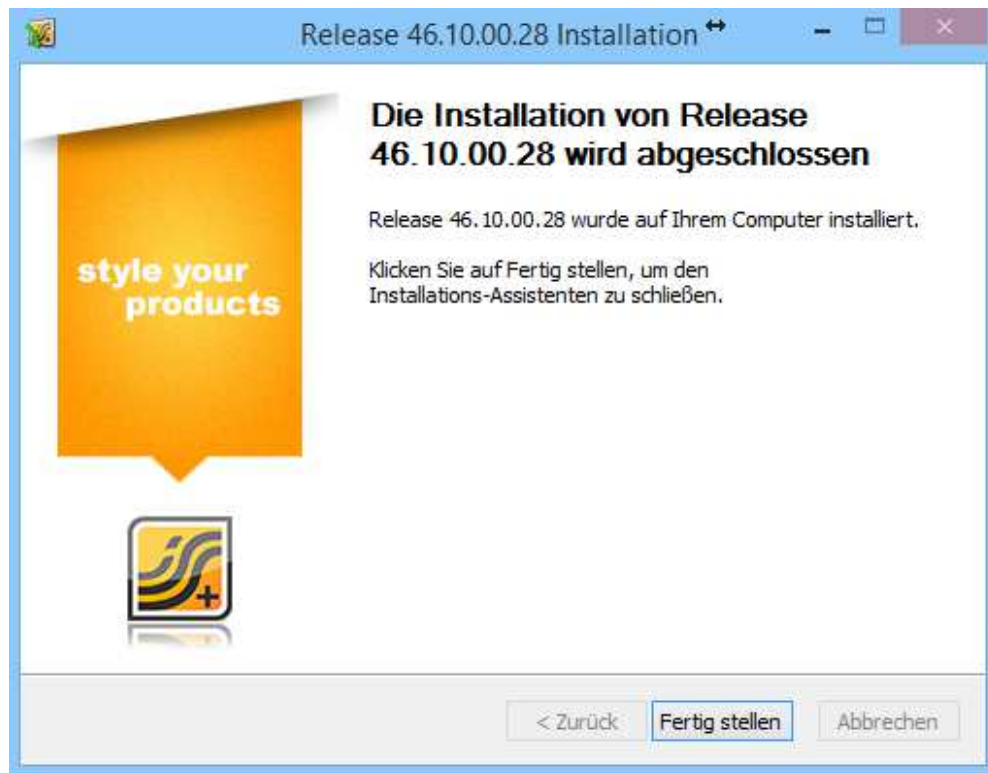

Um die Aktion abzuschließen klicken Sie bitte auf **[Fertig stellen]**.

Danach kann moveIT@ISS+ wie gewohnt gestartet werden.